

DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

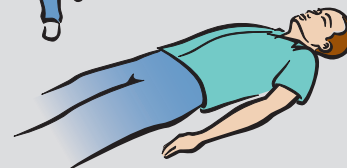

4




Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6

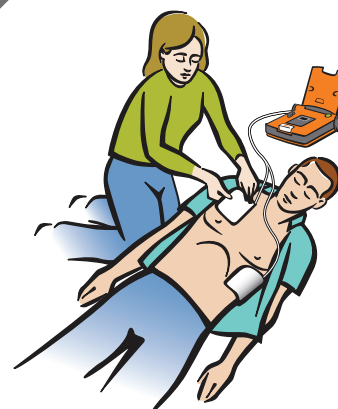

Placez les électrodes.

7




Ne touchez pas le patient.

8




Si nécessaire, le DAE administre automatiquement le choc.

9

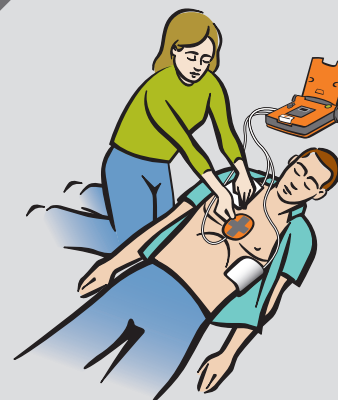

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

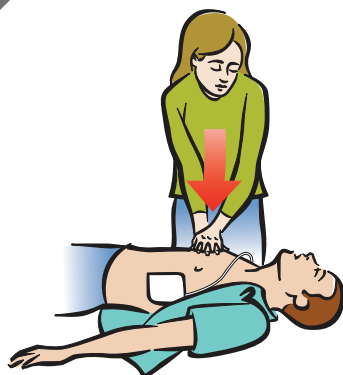

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012. Tous droits réservés.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne



70-01092-11rC

