

PRZEPROWADZANIE AKCJI RATUNKOWEJ

1



Czy pacjent reaguje?

2




Wezwij pogotowie ratunkowe!

3



Weź defibrylator AED.

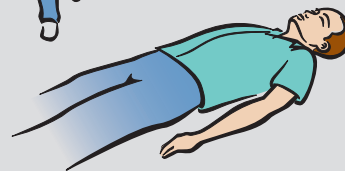

4




Umieść defibrylator AED na podłodze. Otwórz pokrywkę.

5



Usuń ubranie. Odsłoń klatkę piersiową.

6

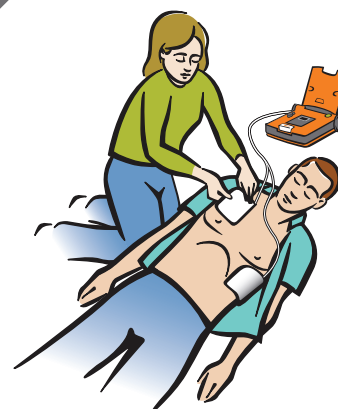

Przymocuj elektrody.

7




Nie dotykaj pacjenta.

8




Gdy będzie to wymagane, defibrylator AED dostarczy wstrząs automatycznie.

9

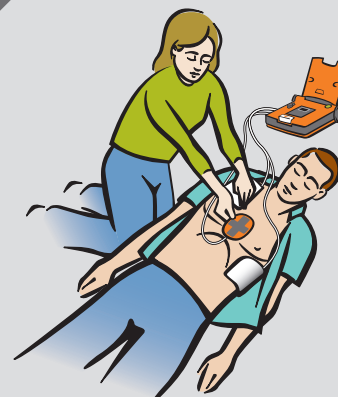

Umieść urządzenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), jeśli jest dostępne.

10

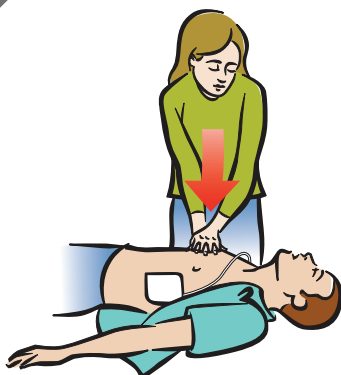

Postępuj zgodnie z komunikatami defibrylatora AED. Wykonaj uciski klatki piersiowej.

11



Po wyświetleniu instrukcji, wykonaj sztuczne oddechy.

Automatyczny defibrylator AED



Cardiac Science oraz logo w kształcie serca-tarczy są znakami towarowymi firmy Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Niemcy



70-01092-22 A

